

NDP Air Total+ Green

Désinfectant de surfaces
par voie aérienne

- Idéal pour les désinfections terminales.
- Efficace contre: Bactéries, Mycobactéries, Champignons et Virus enveloppés.
 - Avec gaz écologique



Vesismin
Health

Preventing infections

NDP Air Total+ Green

Applications

- Salles d'opérations et chambres d'isolement.
- Ambulances.
- Laboratoires et salles blanches.
- Cabinets médicaux et dentaires.
- Cabinets vétérinaires.
- Conduits d'air conditionné.
- Transports en commun.

Efficacité

- **Bactéricide:** (EN1276, EN13697, EN13727) *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*.
- **Mycobactericide:** (EN14348) *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*.
- **Fongicide:** (EN1650, EN13697, EN13624) *Aspergillus brasiliensis (niger)*, *Candida albicans*.
- **Virus enveloppés:** (EN14476) tel que le H1N1, virus grippal surrogé pour virus lipophiliques (Grippe, Coronavirus, Ebola, Hépatites, VIH...).

Composition

- Chlorure de didécyl diméthyl ammonium.
- Phénoxyéthanol.
- Cinnamaldehyde.
- Propulseur et excipients.

Formats

- Bouteille de **50ml** pour désinfecter jusqu'à 40m³.
- Bouteille de **300ml** pour désinfecter jusqu'à 150m³.



CE
0476

Classe IIa.

NDP Air Total+ Green CE est un produit pour la désinfection de surfaces cliniques par voie aérienne. Sa valve «one-shot» vaporise et désinfecte en une seule application, permettant au produit d'accéder aux recoins généralement difficile d'accès.

Il possède un large spectre biocide et une rapidité d'action contre les bactéries, les champignons et les virus.

Il ne contient pas de gaz inflammables, ni d'ingrédients toxiques ou polluants ce qui permet de l'utiliser dans des endroits où d'autres produits ne peuvent pas être appliqués. Il est totalement compatible avec tous types de matériaux et composants électroniques.

Produit sanitaire CE Classe IIa.

NDP Air Total+ Green avec gaz écologique




Désinfection terminale sans nébuliseur

Mode d'emploi

Vous pouvez visionner la vidéo du produit sur notre site




Retirer la bague de sécurité et poser le flacon sur une surface plane.

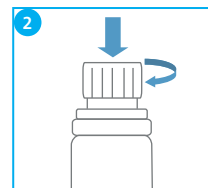

Enfoncer et tourner la valve de décharge totale. L'aérosolisation dure environ entre 1-3 minutes.



Une fois la décharge du produit effectuée, laisser agir. Utiliser en l'absence de personnes.

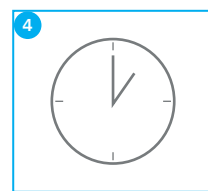

Attendre au moins une heure, ou le temps indiqué par la réglementation locale. Aérer avant de rentrer dans la pièce.

Des bandelettes sont disponibles pour évaluer la portée de NDP AirTotal+ Green

- Bandelettes réactives qui changent de couleur au contact avec le produit.
- Permettent de ne pas négliger les "angles morts" ou les zones difficiles d'accès.
- Résultats immédiats.

 **Vesimin
Health**
Preventing infections